


Koppling mellan Journal III ver 1.8 och MiniQ

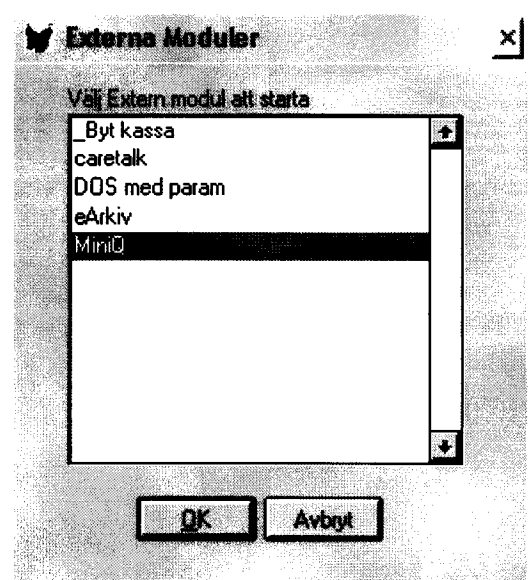

Beskrivning

Från Journal III startas kopplingen via Externa moduler när användare har en patient vald. Journal III skapar en textfil med vald patients personnummer och de uppgifter MiniQ behöver för att kunna göra en analys tex ordinationer och diagnoser mm.

Kopplingen kan endast startas om användaren har hämtat en patient och att användaren har en användarkod som heter MiniQ.

Hur man lägger in en användarkod står beskrivet i dokumentet "Användarkod för MiniQ.doc".

Kopplingens beståndsdelar

MINIQ.FXP - KOPPLINGSFIL

Program som för över information från Journal III till MiniQ, det är denna fil som är själva kopplingsprogrammet. Detta program kontrollerar även om den aktuella användaren har tillgång till rätt sökvägar för att skapa resultatfilen som heter J3_MiniQ.txt.

MINIQ.INI - KONFIGURATIONSFIL

En konfigurationsfil där sökväg för resultatfilen (J3_MiniQ.txt) och startfilen för MiniQ (MQStart.exe) finns angivna. Här anges även vilka analyser som ska med i resultatfilen.

[Journal3-MiniQ]

MiniQpath = sökvägen till MiniQ's startfil (MQstart.exe)
 txtpath = sökväg var resultatfilen (Journal III_MiniQ.txt)
 Date = långt bak i tiden data ska hämtas, anges YYYY-MM-DD
 BT= analysnamn för blodtryck (varken dia- eller systoliskt)
 BtDia= analysnamn för diastoliskt blodtryck
 BtSys= analysnamn för systoliskt blodtryck
 Vikt= analysnamn för vikt (hämtas som analys från labmodulen)
 Krea= analysnamn för vikt (hämtas som analys från labmodulen)

Skiljetecken mellan analyser för blodtryck och analys är tilde (~).

Om Datum eller Txtpath är tomt anges en default inställning, om date / blodtryck /analys är tomt saknas resultat för dessa i resultatfilen. Om MiniQpath är tomt avbryts kopplingen.

Se exempel på nästa sida.

MiniQpath =C:\Program\MiniQ\MQStart.exe
 txtpath =C:\j3demo
 date = 1998-01-01
 BT=Blodtryck
 BtDia=BTligg dia~BTsitt dia
 BtSys=BTligg sys~BTsitt sys
 Vikt=Vikt~viiikt
 Kreatinin=P-KREA~S-KREA

J3_MiniQ.txt - RESULTATFIL

Resultatfilen innehåller uppgifter om den patient som användaren valt när kopplingen startades. Data som skrivs till filen är födelsedatum, kön, ordinationer, diagnoser och analysresultat (för de analyser som är angivna i MiniQ.ini).

Ex. på resultatfil

BIRTH

121212-1212

**

SEX

M

**

NAME

KRANK, KALLE LARS

**

Medicin

1998-03-13~ALVEDON~TABL~500~MG~056856~1-2x3-4

1998-03-13~TENA FOR MEN~~0~~102083~

2000-04-03~FURIX~TABL~40~MG~055377~1x1

2005-07-05~VOLTAREN~ENTEROTABL~25~MG~052811~

2005-08-24~SALURES-K~TABL~0~~057721~1x1

**

Diagnoser

1998-03-13~I10~Hypertoni

1998-03-13~E66-P~Övervikt

2000-04-03~R60~Ödem

2009-02-16~H433~Glaskroppsgtrumling

2009-06-04~H34~Ocklusion av retinala blodkärl

**

Analyser

1998-12-06~Krea~59

2001-01-15~Krea~111

1995-08-01~Vikt~63

1995-12-06~Vikt~72

2009-05-25~BtSys~160/60

2009-05-25~BtSys~140/40

2009-05-25~BtDia~170/70

2009-05-25~BtDia~150/50

**